


Consept

Sitt- & rullstolsdyna med hög komfort

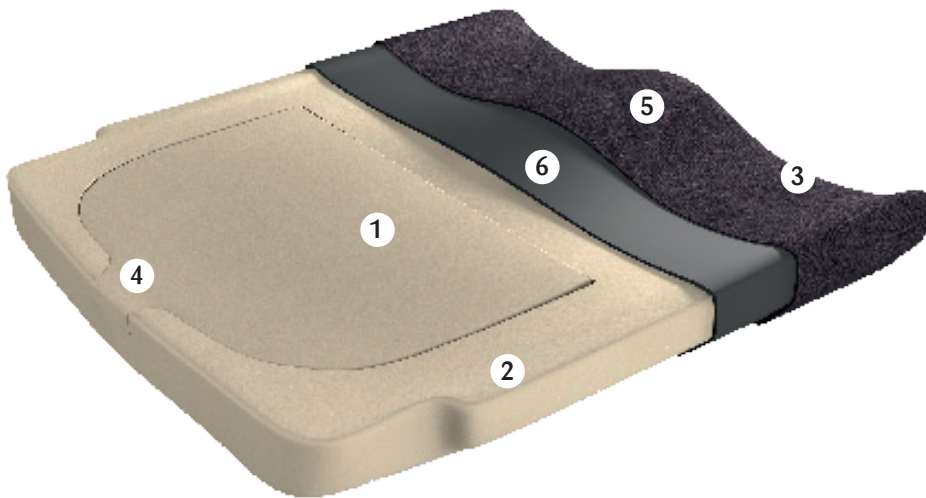

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten ①
- Enkel att rengöra ②
- Sittgrup ③
- Lateralstöd (sidostöd) ④
- Urtag för ben på undersida ⑤
- Urtag för svanskota ⑥
- Bendelare ⑦
- Vätsketätt ytskikt ⑧

Consept är en bekväm och tryckfördelande sitt- och rullstolsdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrup ger den ett stabilt sittande för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot larens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullsto-

len. Komforten hos Concept är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Consept har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inga bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 5 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

Tillbehör: Utjämningsplatta

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm								
	35	37	40	42	45	47	50	55	57
35	70								
40	70	105	115	130	130	150			
45	70	105	115	130	130	150	150	150	150
50			115	130	130	150	150	150	

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.

