


Consept Latus

Sitt- & rullstolsdyna för tunga brukare

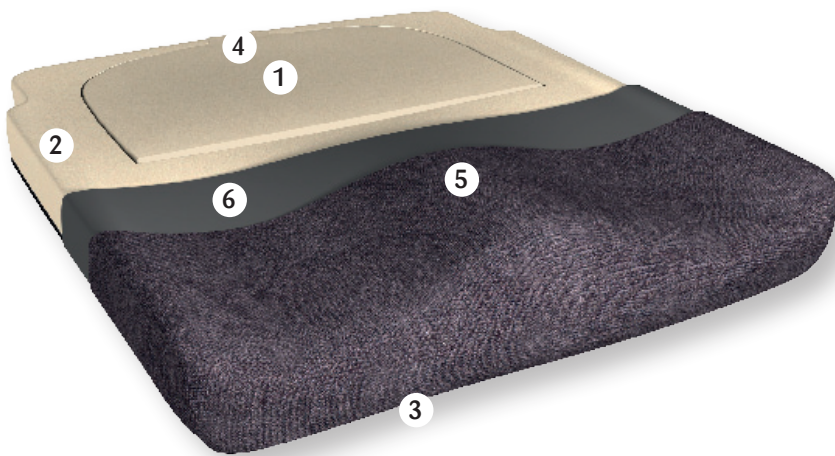

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra
- Sittgrop
- Lateralstöd (sidostöd)
- Urtag för ben på undersida
- Urtag för svanskota
- Bendelare
- Vätsketätt ytskikt
- Förstärkt bottenplatta



Consept Latus är en bekväm och tryckfördelande sitt- och rullstolsdyna avsedd för tunga brukare, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovansidan. Utrustad med förstärkt bottenplatta, sidostöd, bendelare och sittgrop ger den en stabil sits för tunga personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot ländrens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i

rullstolen. Komforten hos Consept Latus är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Consept Latus har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 7 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

Tillbehör: Utjämningsplatta

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÅNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm					
	50	52	55	57	60	65
45	250	250	250			
50	250	250	250	260	260	270
55				260	260	270

Andra storlekar går att beställa. Kontakta vår kundtjänst.

