


Plantur

Sitt- & rullstolsdyna med plan ovansida

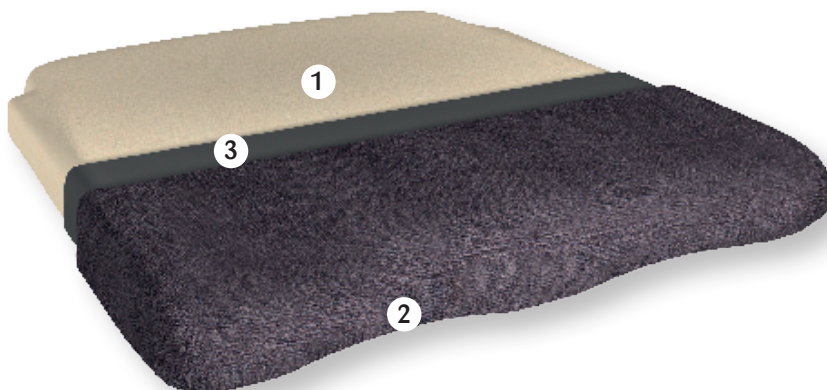

EGENSKAPER

- Enkel att rengöra
- Plan yta
- Sittgrop
- Urtag för ben på undersida
- Vätsketätt ytskikt

①

②

③

Plantur är en tryckfördelande sitt- och rullstolsdyna, uppbyggd av formgjuten polyuretanskum med plan ovansida och med inlägg av viskoelastiskt skum i undersidan.

Sittgrop och urtag för benen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Plantur passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Plantur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 5 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

Tillbehör: Utjämningsplatta

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm									
	30	35	37	40	42	45	47	50	55	
35	70	70								
40		70	100	125	125	125	150	150	150	
45		70	100	125	125	125	150	150	150	
50			125	125	125	125	150	150	150	

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.



Godkänd av
Hjälpmedels-
institutet som
bra hjälpmedel.

Helab Produktion AB
Box 158, 512 24 Svenljunga
Telefon 0771-106 600, Fax 0325-128 40
info@helab.se
www.helab.se

 **helab**
En del av Care of Sweden AB